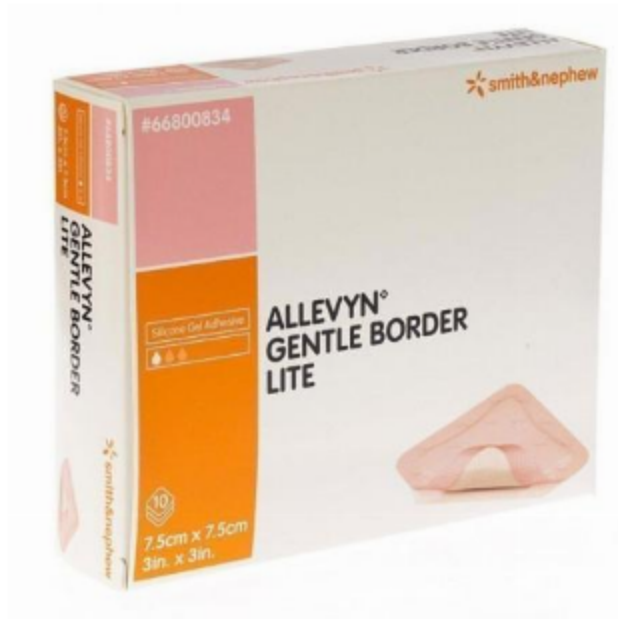




Numéro d'article	023003
Prix HT	23,17 €
Prix TTC	28,04 €
Stock	Plus que 6 en stock

Description

ALLEVYN™ Gentle Border Lite est un pansement en mousse hydrocellulaire de silicone extra-mince pour toutes les plaies avec peu de liquide. Il est conçu pour le soin efficace des plaies quotidiennes.

Caractéristiques et avantages :

- Adaptable, pour une meilleure adhérence
- Réduction du risque de contamination bactérienne grâce au film OPSITE, imperméable à l'eau et aux bactéries
- Indolore et atraumatique à enlever grâce à la couche adhésive en gel de silicone, adaptée à l'utilisation sur les peaux fragiles.
- Permet de prendre une douche
- Facile à appliquer, même dans les endroits difficiles sur le corps
- Application facile, peut être soulevée et réappliquée sans perdre ses propriétés adhésives.

- Tous les avantages de la technologie Triple-Action pour une cicatrisation optimale dans un environnement humide.

Indications :

Pour la cicatrisation secondaire des plaies aiguës et chroniques superficielles ou profondes avec peu ou modérément de liquide de plaie tel que :

- Déchirures cutanées
- Brûlures au premier et au deuxième degré
- Plaies chirurgicales
- Emplacements pour les donateurs
- ...

ALLEVYN Gentle Border Lite n'est pas recommandé sur le sacrum. Postulez:

- Choisissez une compresse de la bonne taille.
- Nettoyer la peau autour de la plaie en éliminant l'excès de liquide.
- Retirer une partie de la feuille de couverture ALLEVYN Gentle Border Lite et placer le pansement sur la peau.
- Lissez le pansement à plat sur la plaie pour vous assurer qu'il n'y a pas de plis.

ALLEVYN Gentle Border Lite application Fréquence du changement de pansement : Pendant les premières étapes de la cicatrisation, les pansements ALLEVYN Gentle Border Lite doivent être inspectés régulièrement. Le pansement peut rester en place jusqu'à 7 jours, selon la quantité de liquide de la plaie et le protocole local. Enlever : Pour retirer le pansement ALLEVYN Gentle Border Lite, soulevez un sommet et tirez doucement le pansement jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré de la plaie. Précautions à prendre : Ne pas utiliser ALLEVYN Gentle Border Lite avec des agents oxydants tels que des solutions d'hypochlorite (par ex. DAKIN) ou du peroxyde d'hydrogène, car ils peuvent décomposer les composants absorbants en polyuréthane du pansement. Cesser l'utilisation en cas de rougeur ou d'hypersensibilité. ALLEVYN Gentle Border Lite est un produit à usage unique. En ouvrant l'emballage, la barrière stérile est brisée. Par conséquent, vous ne devriez pas garder un pansement ouvert pour une utilisation ultérieure.

Disponible en différentes tailles

Référence	Taille	Foam surface	Embal.	CNK
	<i>formes carrées</i>			
66800833	5 x 5 cm	3 x 3 cm	10	2941-870
66800834	7,5 x 7,5 cm	5 x 5 cm	10	2825-750
66800835	10 x 10 cm	7,5 7,5 cm	10	2825-784

66800840	15 x 15 cm	12,5 x 12,5 cm	10	2825-842
	<i>formes rectangulaires</i>			
66800836	5,5 x 12 cm	3 x 9,5 cm	10	2825-800