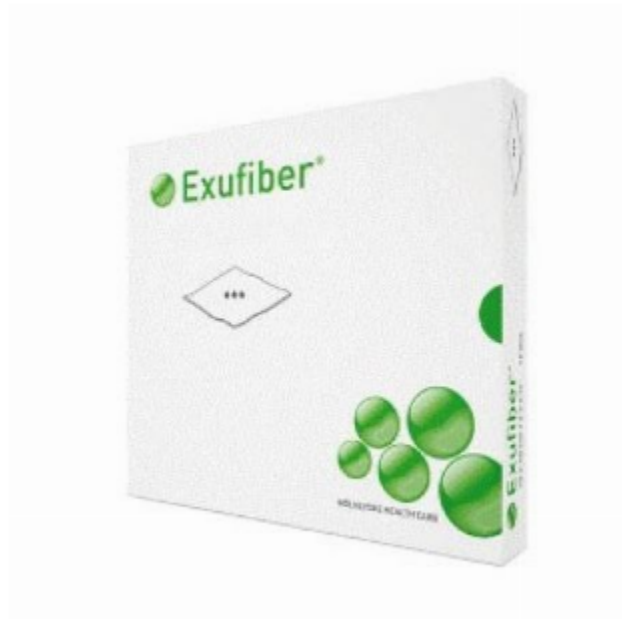




Numéro d'article	023110
Prix HT	47,53 €
Prix TTC	57,51 €
Stock	Plus que 3 en stock

Description

Exufiber[®] est un pansement de fibres gélifiantes unique, hautement absorbant et gélifiant qui a été développé pour les plaies et les cavités modérées à très exsudatives. Le bandage a une excellente capacité de rétention et une grande intégrité structurelle grâce à la technologie Hydrolock[®].

Haute intégrité structurelle

- Simplifie le retrait du pansement dans son ensemble

Excellente capacité de rétention:

- Réduit les risques de fuites et de macération

Gestion efficace de l'exsudat, du sang et des bactéries:

- Réduit le nombre de changements de pansements

- Absorbe et retient l'exsudat même sous compression

En combinaison avec un pansement secondaire avec la technologie Safetac[®]:

- Une option de traitement unique pour les plaies fortement exsudatives

La technologie Hydrolock[®] offre : - excellente intégrité structurelle grâce à l'entrelacement des fibres de PVA. De cette façon, le pansement peut être retiré immédiatement, ce qui peut faire gagner du temps aux infirmières. - excellente capacité de rétention car les fibres PVA renferment l'exsudat

Précautions à prendre

- Toutes les plaies doivent être vérifiées régulièrement. - Si des signes d'infection clinique apparaissent, consultez un professionnel de la santé pour le traitement de l'infection. - Exufiber[®] ne convient pas aux plaies sèches ou aux brûlures graves. - Si le pansement est sec et difficile à enlever, humidifiez-le conformément aux directives locales (par exemple avec une solution saline stérile ou de l'eau stérile) et laissez-le tremper jusqu'à ce qu'il soit facile à enlever. Exufiber[®] peut prendre plusieurs minutes pour former un gel. - Enlever soigneusement le pansement en le nettoyant ou en le rinçant.

Indications

Pour toutes les plaies ou cavités chroniques fortement exsudatives telles que : - escarres de décubitus - Ulcères du pied diabétique - Beenulcera (veineux, artériel, mixte) - Kystes pilonides - Sites des donateurs

Fréquence du changement de pansement

En cas de blessure superficielle, profonde ou cavitaire : Remplacer Exufiber[®] en cas de saturation. L'Exufiber[®] peut rester sur place jusqu'à 7 jours selon l'état de la plaie ou selon l'avis du professionnel de la santé. Dans le cas des sites des donateurs : Remplacer Exufiber[®] en cas de saturation. L'Exufiber[®] peut rester sur place jusqu'à 14 jours selon l'état de la plaie ou selon les conseils du soignant.

Renseignements supplémentaires

Pour plus d'informations : [cliquez ici](#)